

MimiControl Studio

Handleiding

Met je gezicht toetsen indrukken, bijvoorbeeld om Communicator 5 te bedienen.

Mennens.Tech · versie 2.2 · oktober 2026

1. Wat is MimiControl Studio?

MimiControl Studio kijkt via de webcam naar je gezicht. Maak je een bepaalde beweging, bijvoorbeeld je kaak open, dan drukt Studio een toets voor je in, bijvoorbeeld de spatiebalk. Zo bedien je een programma zonder toetsenbord of muis.

Vier woorden die je vaker leest

Gezichts beweging: iets wat je met je gezicht doet en wat Studio meet, zoals kaak open of een lach.


Trigger: een koppeling tussen een beweging en een toets. Voorbeeld: kaak open geeft Spatie.

Drempel: hoe sterk je de beweging moet maken. Een lage drempel reageert snel, een hoge drempel pas bij een grote beweging.

Actief venster: het venster waar je het laatst op klikte. Daar komen je toetsen binnen.

2. Starten

1. **Dubbelklik** op **Start MimiControl Studio v2.bat** in de map van Studio (niet alleen op het .exe-bestand).
2. Windows vraagt of Studio wijzigingen mag aanbrengen. Klik op **Ja**. Dat is nodig: Communicator 5 draait met extra rechten, en alleen dan komen de toetsen van Studio daar binnen.
3. Studio opent. Rechtsboven, onder **Communicator 5**, moet staan: ✓ **Beheerder: ja**.
4. Kies bij **Camera** de juiste webcam en klik op **Camera preview** om te controleren dat je jezelf ziet.

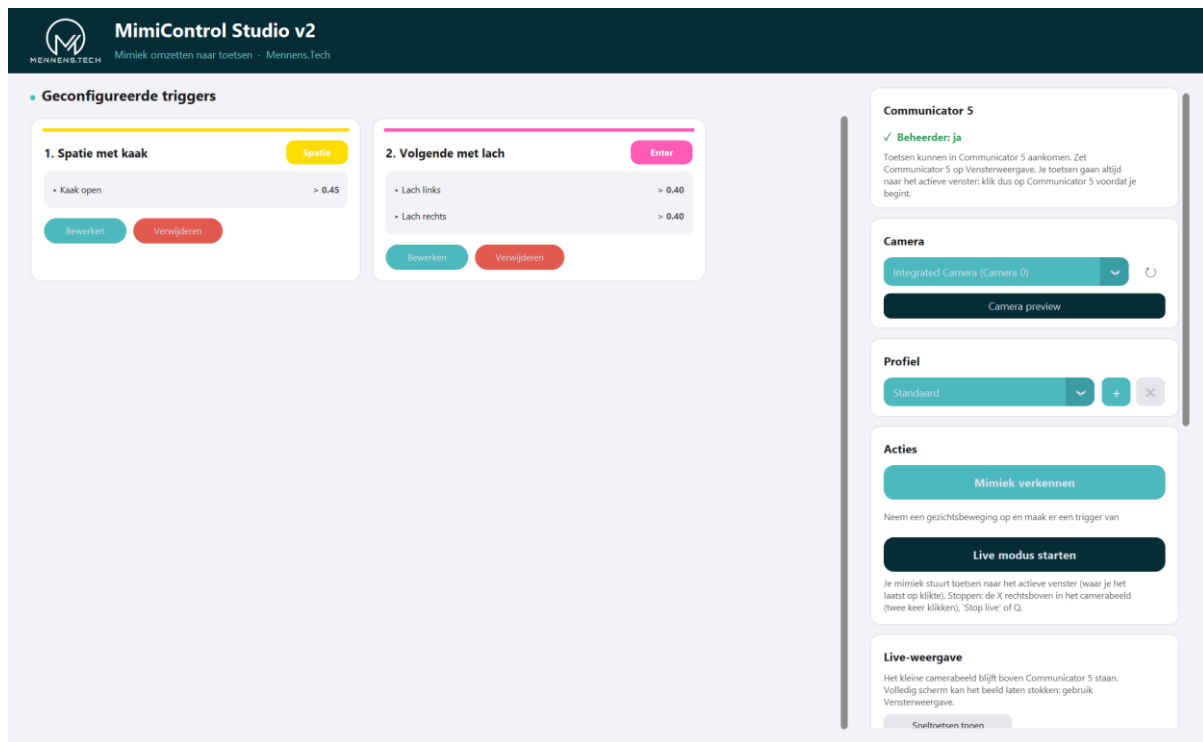

Het hoofdscherm. Links staan je triggers, rechts de instellingen.

Lukt het starten niet?

- Staat er **X** Beheerder: nee? Sluit Studio en start opnieuw. Kies bij de Windows-melding Ja.
- Meldt Studio dat het al draait? Sluit de andere Studio af (Taakbeheer, zoek MimiControl of pythonw) en start opnieuw.

3. Een trigger maken

Je maakt een trigger in drie stappen: kies de bewegingen, neem je beweging op en kies de toets.

Stap 1: kies je gezichts bewegingen

1. Klik op **Mimiek verkennen**.
2. Vink de bewegingen aan die je wilt gebruiken. Hoe minder je aanvinkt, hoe overzichtelijker het wordt: alleen deze bewegingen worden getoond en voorgesteld.
3. Handig: de knoppen **Alles aanvinken** en **Alles uitvinken**, en de snelle keuzes **Bolle mond / tuiten** en **Tong uitsteken (benadering)**.
4. Klik op **Toepassen**.

Kies je gezichtsbewegingen

Alleen de bewegingen die je aanvinkt worden getoond, gemeten en voorgesteld voor triggers.

Tip: de tong kan niet los gemeten worden. Wil je op de tong reageren? Combineer dan 'Kaak open' met 'Lip-trechter'. Wangen staan er ook bij, maar geven vaak 0,00.

Mond Alles Geen

- ☒ Lippen tuiten
- ☒ Lip-trechter
- ☐ Lipdruk L
- ☐ Lipdruk R
- ☐ Bovenlip rollen
- ☐ Onderlip rollen
- ☒ Mond dicht
- ☒ Lach links
- ☒ Lach rechts
- ☒ Mondhoek omlaag L
- ☒ Mondhoek omlaag R
- ☐ Mond naar links
- ☐ Mond naar rechts
- ☐ Bovenlip omhoog
- ☐ Onderlip omhoog
- ☐ Mondkuiltje L
- ☐ Mondkuiltje R
- ☐ Mond strekken L

Ogen Alles Geen

- ☒ Oogknip L
- ☒ Oogknip R
- ☒ Oog wijd L
- ☒ Oog wijd R
- ☒ Oog knijp L
- ☒ Oog knijp R
- ☐ Blik omhoog L
- ☐ Blik omhoog R
- ☐ Blik omlaag L
- ☐ Blik omlaag R
- ☐ Blik naar binnen L
- ☐ Blik naar binnen R
- ☐ Blik naar buiten L
- ☐ Blik naar buiten R

Snelle keuze: Bolle mond / tuiten Tong uitsteken (benadering)

Alles aanvinken
Alles uitvinken
Toepassen
Annuleren


Kies welke gezichtsbewegingen je wilt gebruiken.

Tong uitsteken

Het systeem kan de tong niet los meten. De snelle keuze 'Tong uitsteken (benadering)' vinkt daarom 'Kaak open' en 'Lip-trechter' aan: een combinatie die lijkt op tong uitsteken. Stel de drempels van beide goed in en test het even.

Stap 2: neem je beweging op

1. Er opent een venster met je camerabeeld en balkjes voor elke beweging. Klik op **Opname starten** en maak je beweging een paar keer.
2. Klik op **Opname stoppen**. De sterkste beweging krijgt een gele balk.
3. Mis je een beweging? Klik op **Beweging kiezen** en vink er een aan. Heb je de beweging niet gemaakt tijdens de opname, kies dan **Opnieuw opnemen**.
4. Klik op **Trigger maken**.

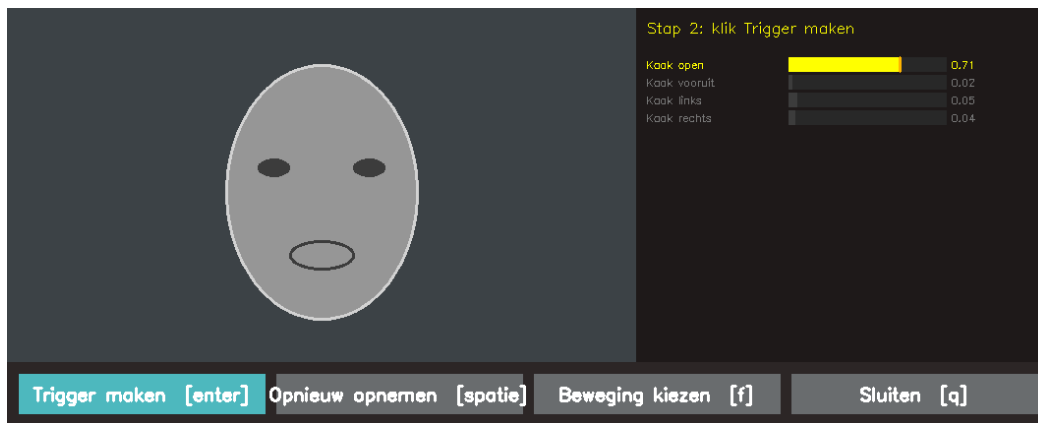

Opnemen: eerst Opname starten, daarna Trigger maken.

Stap 3: kies de toets en stel de drempel in

1. Geef de trigger een naam.
2. Kies bij **Actie** de toets die Studio moet indrukken (kies uit de lijst of klik op **Toets opnemen** en druk de toets in).
3. Zet bij elke beweging de schuifbalk op de juiste drempel. De kolom **Gemeten** laat zien hoe sterk je de beweging maakte. Zet de drempel iets lager dan dat. Dan lukt het ook als je de beweging iets zwakker maakt.
4. Klik op **Opslaan**. Je trigger staat nu op het hoofdscherm.

Nieuwe trigger

Naam:

Actie: Spatie Toets opnemen

Kies de gezichtsbewegingen en stel in hoe sterk je ze moet maken (drempel):
 Tip: de tong kan niet los gemeten worden. Wil je op de tong reageren? Combineer dan 'Kaak open' met 'Lip-trechter'. Wangen staan er ook bij, maar geven vaak 0.00.

Beweging	Gemeten	Drempel	Waarde
☒ Kaak open	piek 0.62	<input type="range" value="0.43"/>	0.43
☐ Kaak vooruit	piek 0.00	<input type="range" value="0.15"/>	0.15
☒ Kaak links	piek 0.05	<input type="range" value="0.03"/>	0.03
☒ Kaak rechts	piek 0.04	<input type="range" value="0.03"/>	0.03

Opslaan Annuleren

Naam, toets en drempel instellen.

4. Live gebruiken met Communicator 5

1. Zet Communicator 5 op **Vensterweergave** (niet op volledig scherm). Dat voorkomt dat het camerabeeld blijft hangen.
2. Klik in Studio op **Live modus starten**.
3. Klik op Communicator 5, zodat dat het **actieve venster** is. Studio drukt de toetsen altijd in het actieve venster in.
4. Maak je beweging. Studio drukt de toets in en toont dat linksonder in het camerabeeld.



Het label laat zien welke toets Studio net heeft verstuurd.

Staat het label op grijs en zegt het **Niet verstuurd**, dan is de toets niet aangekomen. Zie hoofdstuk 6.

Instellingen aanpassen

Alles wat je in het hoofdscherm instelt, wordt bewaard in je profiel.

- **Camerabeeld tonen, Grootte, Hoek:** waar en hoe groot het camerabeeld staat.
- **Triggerbalken tonen:** een balk naast het camerabeeld met de status van je triggers.
- **Toetsen sturen:** zet je dit uit, dan kun je oefenen zonder dat er toetsen worden ingedrukt.
- **Toets-melding tonen:** het label met de verstuurde toets aan of uit.
- **Cooldown:** hoe lang Studio wacht voordat dezelfde trigger opnieuw mag.
- **Vasthoudtijd:** hoe lang je de beweging moet vasthouden voordat de toets wordt ingedrukt. Handig tegen ongewilde bewegingen.
- **Toetsduur:** hoe lang de toets ingedrukt blijft.

5. Stoppen

Klik **twee keer** op de kleine **X** rechtsboven in het camerabeeld. Bij de eerste klik wordt de knop rood en staat er 'Stoppen? Klik nogmaals'. Zo stopt Studio niet per ongeluk. Klik je niet nog een keer, dan gaat de knop na drie seconden terug naar de X.



Na de eerste klik vraagt de knop om bevestiging.

Andere manieren: de knop **Stop live** in het drempelpaneel, of de toets **Q** als het camerabeeld is aangeklikt.

6. Werkt het niet?

Wat zie je?	Mogelijke oorzaak	Wat doe je?
De toets komt niet aan in Communicator 5	Studio draait niet met beheerdersrechten.	Sluit Studio en start opnieuw. Klik Ja bij de Windows-melding. Controleer ✓ Beheerder: ja.
Het label zegt 'Niet verstuurd'	'Toetsen sturen' staat uit, of Windows blokkeert de toets.	Zet 'Toetsen sturen' aan en controleer de beheerdersrechten.
De toets gaat naar het verkeerde programma	Het actieve venster is een ander venster.	Klik eerst op Communicator 5. De toets gaat altijd naar het actieve venster.
De camera werkt niet of het beeld is zwart	Een andere Studio of app gebruikt de camera.	Sluit andere camera-apps en oude Studio's (Taakbeheer: MimiControl of pythonw) en start opnieuw.
Melding dat Studio al draait	Er loopt al een Studio.	Sluit de andere Studio of start de pc opnieuw.
Het camerabeeld staat stil boven Communicator	Communicator staat op volledig scherm.	Zet Communicator 5 op Vensterweergave.
Het rode label 'Geen gezicht'	Studio ziet je gezicht niet.	Zorg voor goed licht en ga recht voor de camera zitten.
De trigger gaat te snel of per ongeluk af	De drempel is te laag of de vasthoudtijd te kort.	Verhoog de drempel van de trigger of de vasthoudtijd.
De trigger gaat niet af	De drempel is te hoog.	Verlaag de drempel, of neem de beweging opnieuw op.

7. Sneltoetsen in het camerabeeld

Klik eerst op het camerabeeld. Daarna werken deze toetsen:

Toets	Wat doet het?	Toets	Wat doet het?
Q	Live stoppen	K	Toets-melding aan/uit
P	Beeld pauzeren	A	Altijd bovenop aan/uit
1 2 3	Grootte van het beeld	M	Volledig gezichtsnet aan/uit
T	Triggerbalken aan/uit	F	Beeld spiegelen
S	Toetsen sturen aan/uit	O	Volgende hoek
C	Alleen camerabeeld		

Vragen of problemen? Neem contact op met Mennens.Tech.